

Co to je JOURNEY[◇] DEUCE[◇]?

JOURNEY[◇] DEUCE[◇] Bi-Compartmental kolenní systém je součástí produktové linie JOURNEY, aktivního řešení kolene – inovační skupina produktů, která nastavuje nový standart v kinematice pro současné více aktivní pacienty, Jde o náhradu zachovávající co nejvíce kosti a vazivových struktur a náhradu s více anatomicky přizpůsobenou komponentou. JOURNEY[◇] DEUCE[◇] byla navržena pro ošetření izolované osteoartrózy na mediálním kondylu a patelofemorálním skloubení. Některé zdroje uvádí, že JOURNEY[◇] DEUCE[◇] může ošetřit až 70% všech kolen, indikovaných k primární totální náhradě. JOURNEY[◇] DEUCE[◇] je absolutní unikát, který jiné firmy v této době ve své nabídce protéz zatím nemají.



JOURNEY[◇] DEUCE[◇] – hlavní charakteristika


- Revoluční femorální komponenta – exkluzivně od Smith & Nephew.
- Navržena pro osteoartrózu na mediálním kondylu a patelofemorálním skloubení.
- Optimalizuje patelární cestu – lateralizací a prohloubením trochleárního žlábků se zlepšil chod pately při celém rozsahu pohybu; založeno na klinicky úspěšném designu trochleárního žlábků u GENESIS[◇] II.
- Spojení s GENESIS[◇] II patelou a uni tibíí.
- Zachovává ACL a PCL.
- Připravené s příjenným (familiárním) instrumentariem.

JOURNEY[◇] DEUCE[◇] – výhody produktu



- Minimálně invazivní.
- Menší kostní resekce ve srovnání se standardní primární totální náhradou
- Zachování vazů (ACL & PCL).
- Možná snadnější revize na primární GENESIS[◇] II, pokud je to třeba.
- Menší krevní ztráty ve srovnání s primární totální náhradou.
- Rychlejší rehabilitace ve srovnání s primární totální náhradou.
- OXINIUM[◇] technologie od Smith & Nephew.

JOURNEY[◇] DEUCE[◇] – operační technika ve zkratce

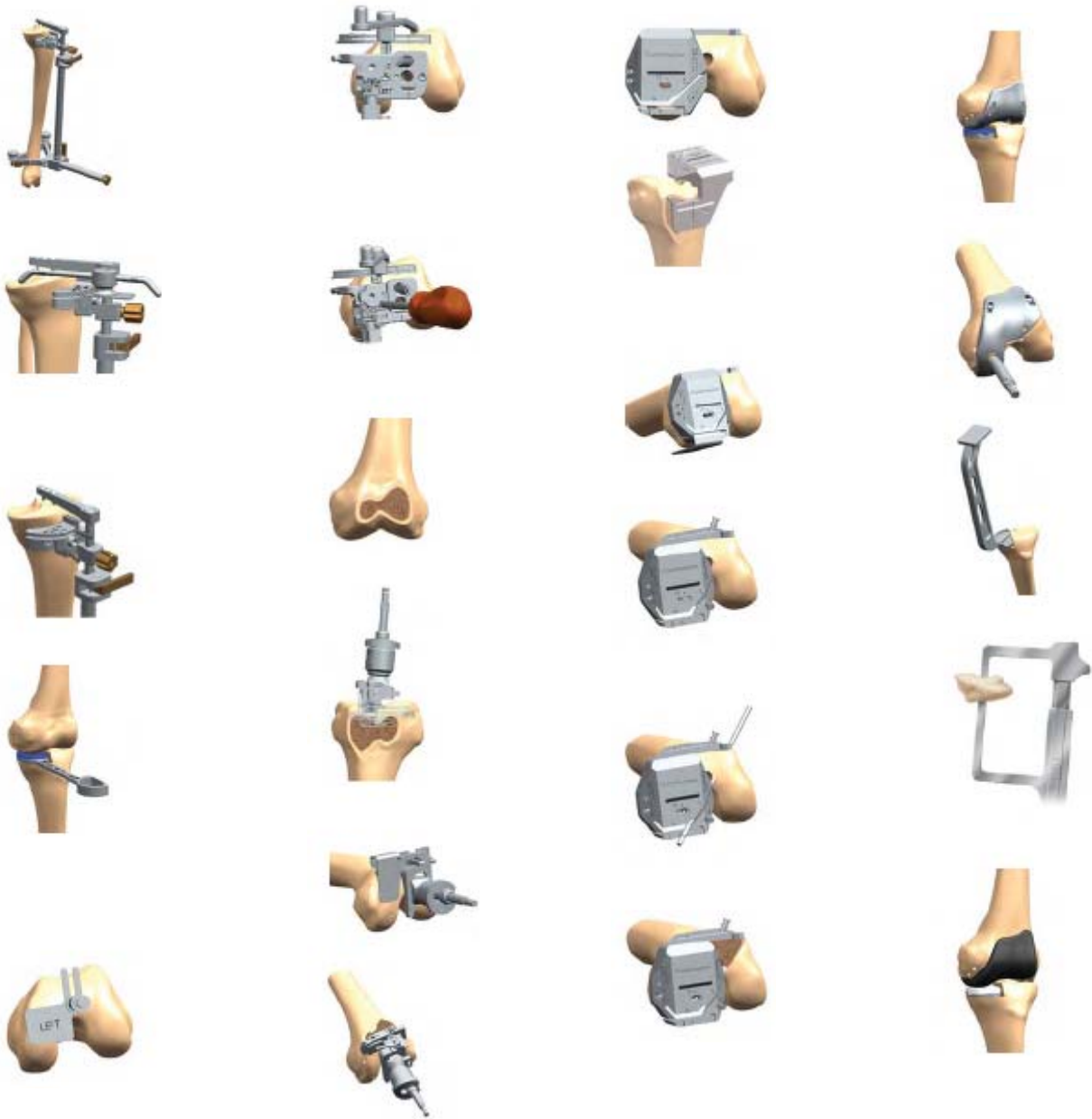

 We are **smith&nephew**



AURA Medical s.r.o.

K Verneráku 4

148 00 Praha 4

Tel.: 244 910 200

aura@aura-group.cz

www.aura-group.cz

◇ Ochranná známka Smith & Nephew